



# TSK PEIT針

(経皮的エタノール注入療法)

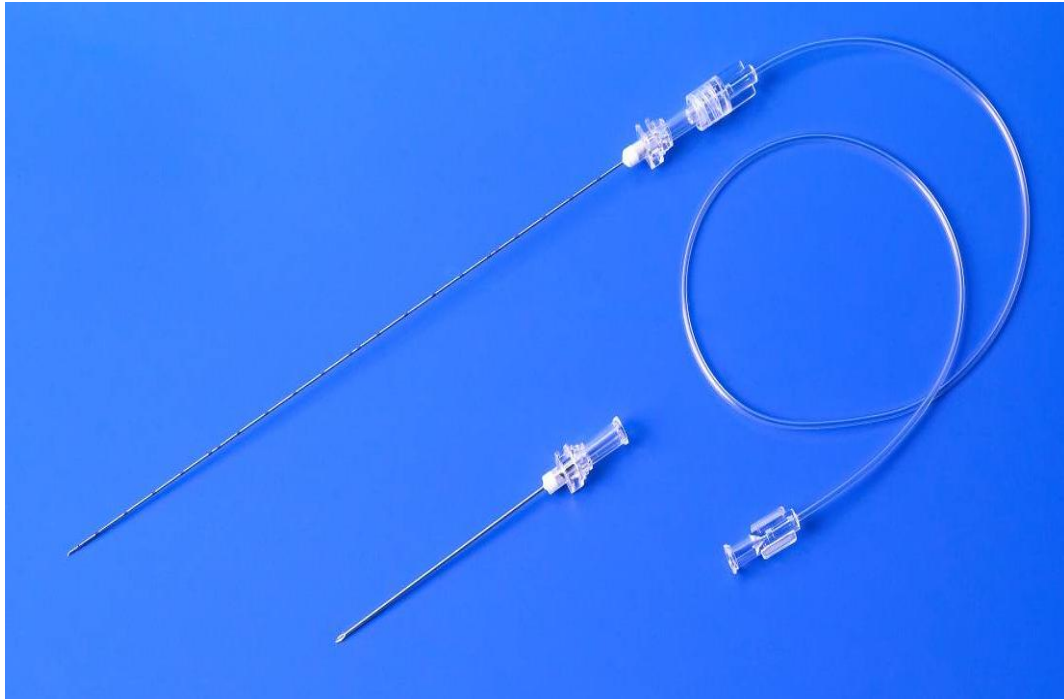

## ■特徴

《サイドホール穴数》  
先端 1箇所  
側孔 6箇所 (先端より 6mm)

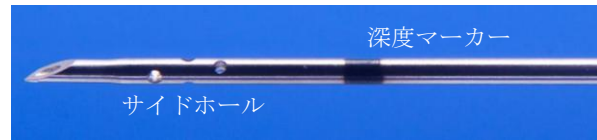

### サイドホール

6箇所のサイドホールにより、効果的なエタノールの拡散が得られます。

### 深度マーカー

1cm ごとの深度マーカーにより、正確な刺入が可能です。

### レーザーシャープ

独自の刃先形状により、切れ味に優れており、容易で正確な穿刺が行えます。

## ■製品仕様

医療機器認証番号：220AIBZX00075000 クラスII 管理医療機器

規格		品目コード	付属品	入り数
21G	150 mm	PIT - 21150	固定針 19G×35 mm 延長チューブ φ2.0×φ1.0×500 mm	1箱 10本入り EOG 滅菌済み
	200 mm	PIT - 21200	固定針 19G×75mm 延長チューブ φ2.0×φ1.0×500 mm	

定価:28,000/箱



TSK LABORATORY, JAPAN

製造販売・販売 株式会社 タスク  
〒328-0002 栃木県栃木市惣社町 1485-11  
TEL 0282-27-8426 FAX 0282-27-1943  
HP:www.tsklab.co.jp E-mail:tsk@tsklab.co.jp