

TSK

TSK SELECT™ NEEDLE

TSKセレクト™ ニードル
単回使用注射用針






刃面の向きが一目でわかる マーキング付きの針基



TSKセレクトニードルの針基（ハブ）には、刃面の向きが一目でわかるようマーキングが施されております。

34Gのように極細のため刃先が見にくい状況、あるいは、キャップを付けた状態や皮内で刃先が確認できない状況であっても、刃面の向きが簡単に確認できます。

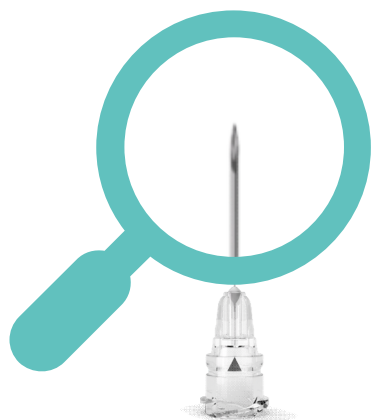

34G (OD: 0.18mm)

34Gの極細針で患者への負担を軽減

TSKセレクトニードルの刃先形状は、複数回の穿刺を行っても刃先が鈍化しにくい形状を目指し設計されました。

また、最も細いゲージである「真の*」34G（外径：0.18mm）は極細の針であるため、穿刺時の不快感を低減したい部位、また、手技後のリカバリーが特に気になる顔などの部位へご使用で、患者への負担軽減を期待できます。

*国際標準化機構（ISO）規格準拠の意

シリンジのタイプを選ばず使える* 針基設計

TSKセレクトニードルの針基はルアーロックタイプになっております。
同じルアーロックタイプのシリンジと併せてお使いいただくことで、高
粘度薬液注入時等に起きうるポップオフや薬液漏れのリスクを軽
減します。

さらに、スリップタイプのシリンジにもフィットする内部形状設計を行っ
ておりますので、シリンジのタイプを選ばずに*お使いいただけます。

*国際標準化機構（ISO）規格への準拠したシリンジのみ



針基内の残留薬液を減らす ローデッドスペース設計で薬液の節約をサポート

TSKセレクトニードルの針基は、注入後に針基内に残る薬液を
少しでも減らせるような形状を目指し設計されました。

薬液を無駄なく使えるため、施術数を増やす、あるいは、
費用の削減につなげることが可能です。

また、TSKシリンジと一緒にご使用いただくことで、
針基内のデッドスペースをさらに減らすことができます。

TSKシリンジはこちら



TSKセレクト™ニードル | 製品ラインアップ

品番	製品名
TSN-018004-100	TSKセレクトニードル 34G (0.18mm) x 4mm
TSN-018009-100	TSKセレクトニードル 34G (0.18mm) x 9mm
TSN-020004R-100	TSKセレクトニードル 33G (0.20mm) x 4mm RW
TSN-020009R-100	TSKセレクトニードル 33G (0.20mm) x 9mm RW
TSN-020004-100	TSKセレクトニードル 33G (0.20mm) x 4mm
TSN-020009-100	TSKセレクトニードル 33G (0.20mm) x 9mm
TSN-020013-100	TSKセレクトニードル 33G (0.20mm) x 13mm
TSN-023004-100	TSKセレクトニードル 32G (0.23mm) x 4mm
TSN-023009-100	TSKセレクトニードル 32G (0.23mm) x 9mm
TSN-023013-100	TSKセレクトニードル 32G (0.23mm) x 13mm
TSN-025004-100	TSKセレクトニードル 31G (0.25mm) x 4mm
TSN-025009-100	TSKセレクトニードル 31G (0.25mm) x 9mm
TSN-025013-100	TSKセレクトニードル 31G (0.25mm) x 13mm
TSN-030004-100	TSKセレクトニードル 30G (0.30mm) x 4mm
TSN-030009-100	TSKセレクトニードル 30G (0.30mm) x 9mm
TSN-030013-100	TSKセレクトニードル 30G (0.30mm) x 13mm
TSN-030013E-100	TSKセレクトニードル 30G (0.30mm) x 13mm ETW
TSN-030025-100	TSKセレクトニードル 30G (0.30mm) x 25mm
TSN-040013-100	TSKセレクトニードル 27G (0.40mm) x 13mm
TSN-040019R-100	TSKセレクトニードル 27G (0.40mm) x 19mm RW
TSN-050013-100	TSKセレクトニードル 25G (0.50mm) x 13mm
TSN-050025R-100	TSKセレクトニードル 25G (0.50mm) x 25mm RW

販売名: TSKインジェクションニードル
 医療機器承認番号: 30600BZX00097000
 一般的名称: 単回使用注射用針
 単回使用 クラスⅡ 管理医療機器
 ガンマ線滅菌 100本入り/箱

※ご使用前に最新の電子添文をご確認ください。



製造販売元 株式会社タスク
 〒328-0002 栃木県栃木市惣社町1510-1
 TEL : 0282-27-0005 FAX : 0282-25-6511
 CAT-TSN-J03 2025.7