

製品ラインナップ

ゲージ	長さ	針管肉厚	品番
34G (0.18mm)	2mm	Thin Wall	TSN-018002-100
	4mm	Thin Wall	TSN-018004-100
	9mm	Thin Wall	TSN-018009-100
33G (0.20mm)	4mm	Regular Wall	TSN-020004R-100
	9mm	Regular Wall	TSN-020009R-100
	2mm	Thin Wall	TSN-020002-100
	4mm	Thin Wall	TSN-020004-100
	9mm	Thin Wall	TSN-020009-100
	13mm	Thin Wall	TSN-020013-100
32G (0.23mm)	2mm	Thin Wall	TSN-023002-100
	4mm	Thin Wall	TSN-023004-100
	9mm	Thin Wall	TSN-023009-100
	13mm	Thin Wall	TSN-023013-100
31G (0.25mm)	4mm	Thin Wall	TSN-025004-100
	9mm	Thin Wall	TSN-025009-100
	13mm	Thin Wall	TSN-025013-100
30G (0.30mm)	2mm	Thin Wall	TSN-030002-100
	4mm	Thin Wall	TSN-030004-100
	9mm	Thin Wall	TSN-030009-100
	13mm	Thin Wall	TSN-030013-100
	13mm	Extra Thin Wall	TSN-030013E-100
	25mm	Thin Wall	TSN-030025-100
27G (0.40mm)	13mm	Thin Wall	TSN-040013-100
	19mm	Regular Wall	TSN-040019R-100
25G (0.50mm)	13mm	Thin Wall	TSN-050013-100
	25mm	Regular Wall	TSN-050025R-100

※ご使用前に最新の電子添文をご確認ください。

販売名：TSKインジェクションニードル
医療機器承認番号：30600BZX00097000
一般的名称：単回使用注射用針
単回使用 クラスⅡ 管理医療機器
ガンマ線滅菌 100本入り/箱


TSK 株式会社タスク
TSK Laboratory, Japan
〒328-0002 栃木県栃木市惣社町1510-1
TEL: 0282-27-0005 FAX: 0282-25-6511
www.tsklab.co.jp

TSK

Made in **JAPAN**

TSK
SELECT™
NEEDLE

TSKセレクト™ニードル
単回使用注射用針

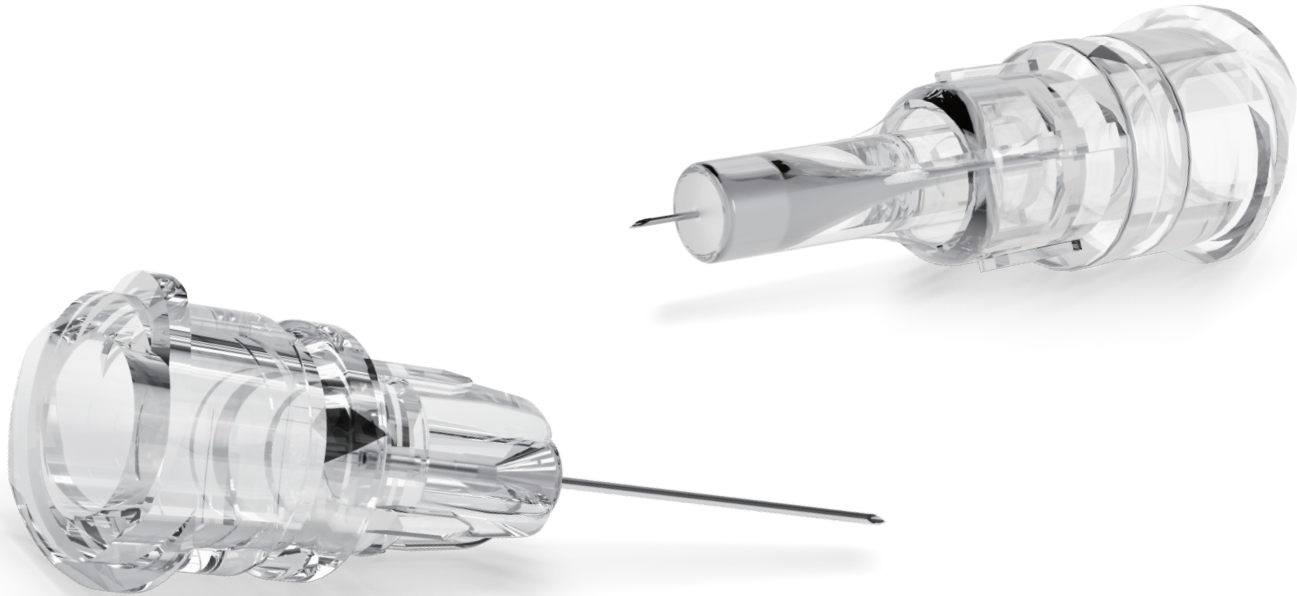

THE SMALL THINGS THAT MATTER

幅広いサイズラインナップ

UP TO

34G×2mm

極細の「真の*」34G（外径：0.18mm）は、穿刺時の不快感を低減したい部位や、手技後のリカバリーが気になる部位へご使用いただくことで、患者への負担軽減を期待できます。

*国際標準化機構（ISO）規格準拠の意



2mm用の針基と他のサイズの針基には形状の違いがございますが、TSKセレクト™ニードルの機能性および利点は同一です。

刃先の耐久性

独自の刃先デザインにより、複数回穿刺したあとも刃先がだれにくい仕様を実現いたしました。

ハブマーキング

TSKセレクト™ニードルの針基（ハブ）には、刃面の向きが一目でわかるようマーキングが施されています。

34Gのように、極細のため刃先が見にくい状況や、皮膚への穿刺後に刃面の向きを確認したいといった状況であっても、刃面の向きを簡単に確認できます。

薬液の無駄を低減する最適化された針基設計

TSK セレクト™ニードルの針基はデッドスペースを低減するよう設計されており、より正確かつ効率的な薬剤投与を可能にします。TSKシリンジと組み合わせてご使用いただくことで、針基内部のデッドスペースをさらに低減でき、無駄の削減により高い効果を期待できます。



TSKシリンジはこちら



TSKセレクト™ニードルをTSKシリンジと組み合わせて使用した場合に残るデッドスペースの量。

シリンジのタイプを選ばず使える*針基設計

TSKセレクト™ニードルの針基はルアーロックタイプとなっております。同じくルアーロックタイプのシリンジと併せてお使いいただくことで、高粘度薬液注入時等に起きうるポップオフや薬液漏れのリスクを低減します。

さらに、スリップタイプのシリンジにもフィットする内部形状設計を行っており、シリンジのタイプを選ばずに*お使いいただけます。

*国際標準化機構（ISO）規格への準拠したシリンジのみ